



InterPulse

Pulsed lavage system

インターパルス パルスイリゲーションシステム

- ▶ シンプル & パワフル
- ▶ 進化したパルスイリゲーション／サクション

InterPulse Pulsed lavage system

さらにパワーアップ！ さらに使いやすく！

パルス洗浄装置のパイオニア ストライカー社が持つ経験とノウハウを結集
外部ポンプとの接続など煩雑なセットアップをなくし、シンプルさと使いやすさを追求



- パルス期とインターパルス期がはっきり別れる特殊モーターをハンドピースに内蔵し、効果的な洗浄が可能です。
- 同軸チップが追加になりました。吸引口と噴出口の同軸構造のタイプでは、より高い水圧の噴出により洗浄効果が高まります。
- トリガー操作によるバリアブルコントロールが可能。さらにトリガーロック機能が加わり、使いやすさがアップしました。
- 使用部位、噴出方向に応じてピストルのようにも、また杖のように握ることもできます。どちらも手にフィットするよう人間工学的にデザインされています。

人工関節置換術のために…

- ボーンセメントインターフェースを約 2.5 倍強化
- 脂肪塞栓症の危険率を減少
- 同時吸引が可能です
- 使いやすいエルゴノミクスデザイン


豊富なニーズに対応するラインナップ

0210-004-000
大腿骨髄腔ブラシ
サクション・
イリゲーション用

0210-005-000
髄腔
イリゲーション専用

0210-007-000
大腿骨髄腔
同軸サクション・
イリゲーション用

0210-008-000
大腿骨髄腔チップ
サクション・
イリゲーション用

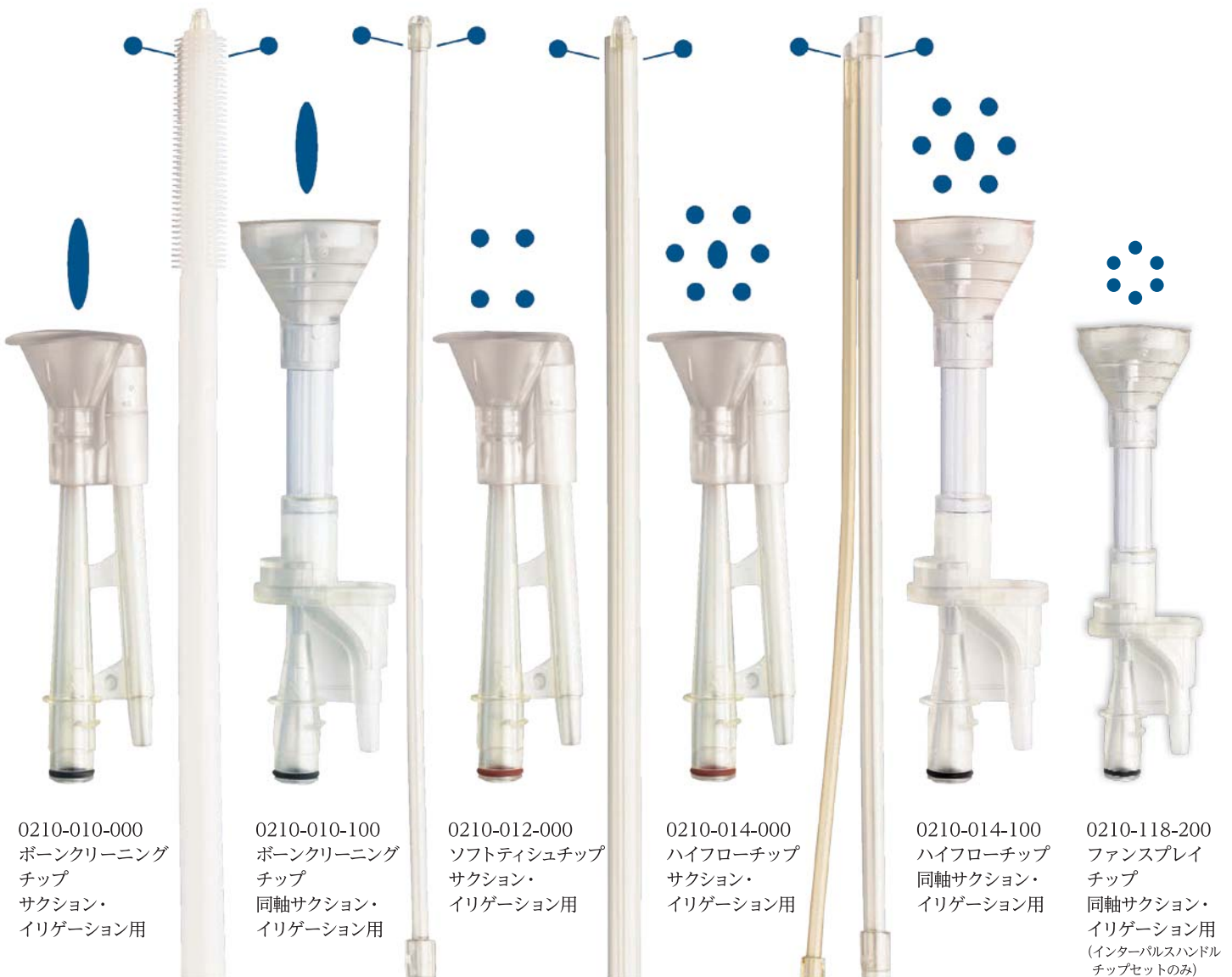

0210-010-000
ボーンクリーニング
チップ
サクション・
イリゲーション用

0210-010-100
ボーンクリーニング
チップ
同軸サクション・
イリゲーション用

0210-012-000
ソフトティッシュチップ
サクション・
イリゲーション用

0210-014-000
ハイフローチップ
サクション・
イリゲーション用

0210-014-100
ハイフローチップ
同軸サクション・
イリゲーション用

0210-118-200
ファンスプレイ
チップ
同軸サクション・
イリゲーション用
(インターバルスハンドル
チップセットのみ)

製品リスト

オールディスポタイプ (滅菌済)*

カタログ番号	製品名	規格
0210-100-000	インターパルス ハンドル	サクシオンチューブ付
0210-110-000	インターパルス ハンドル・チップセット ボーンクリーニング	サクシオンチューブ付
0210-112-000	インターパルス ハンドル・チップセット ソフトティッシュ	サクシオンチューブ付
0210-114-000	インターパルス ハンドル・チップセット ハイフロー	サクシオンチューブ付
0210-118-000	インターパルス ハンドル・チップセット ファンスプレイ	サクシオンチューブ付
0210-118-200	インターパルス ハンドル・チップセット ファンスプレイ	サクシオンチューブ付 同軸 延長 32mm タイプ
0210-200-000	インターパルス ハンドル	サクシオン接続口付
0210-210-000	インターパルス ハンドル・チップセット ボーンクリーニング	サクシオン接続口付
0210-212-000	インターパルス ハンドル・チップセット ソフトティッシュ	サクシオン接続口付
0210-214-000	インターパルス ハンドル・チップセット ハイフロー	サクシオン接続口付
0210-218-000	インターパルス ハンドル・チップセット ファンスプレイ	サクシオン接続口付

充電バッテリータイプ (滅菌済)*

カタログ番号	製品名	規格
0211-100-000	インターパルス 充電式ハンドル	サクシオンチューブ付
0211-110-000	インターパルス 充電式ハンドルセット ボーンクリーニング	サクシオンチューブ付

充電バッテリー／バッテリー用アクセサリ

カタログ番号	製品名	規格
0211-022-000*	インターパルス バッテリーパック	
0211-024-000	インターパルス バッテリーチャージャー	8 個用

共通アクセサリ (滅菌済)

カタログ番号	製品名	規格
0210-004-000*	インターパルス チップ 大腿骨髄腔ブラシ	サクシオン・イリゲーション
0210-005-000*	インターパルス チップ 髄腔	イリゲーション専用
0210-007-000*	インターパルス チップ 大腿骨髄腔	同軸サクシオン・イリゲーション
0210-008-000*	インターパルス チップ 大腿骨髄腔	サクシオン・イリゲーション
0210-010-000*	インターパルス チップ ボーンクリーニング	サクシオン・イリゲーション
0210-010-100*	インターパルス チップ ボーンクリーニングチップ	同軸サクシオン・イリゲーション
0210-012-000*	インターパルス チップ ソフトティッシュ	サクシオン・イリゲーション
0210-014-000*	インターパルス チップ ハイフロー	サクシオン・イリゲーション
0210-014-100*	インターパルス チップ ハイフロー	同軸サクシオン・イリゲーション
0210-018-000*	インターパルス チップ ファンスプレイ	サクシオン・イリゲーション
0210-034-000*	インターパルス スプラッシュシールド ソフトコーンメディアム	径 15.2cm
0210-058-000*	インターパルス チップ マルチオリフィス	同軸シールド無
SR-203-30	ストラライカー デュアルイリゲーションチュービング	

医療機器認証番号 販売名

* 229AFBZX00014000 インターパルス パルスイリゲーション

Japan

この印刷物はストラライカー社の製品を掲載しています。全てのストラライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストラライカー社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: IT1-99
YN/MI 0m 10/17Copyright © 2017 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストラライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/