

Arthroscopy system

アースロスコープ

- ▶ PRECISION IE 4K アースロスコープ AC
- ▶ IDEAL EYES HD
- ▶ PRECISION C マウントタイプ



オートクレーブ滅菌対応 アースロスコープシステム

KEY FEATURES

① 高精細画像の再現

ストライカースコープシリーズはHDカメラ、4Kカメラに対応しており従来品*と比べより明るく鮮明に映像を伝えることができます。

またPRECISION IE 4K アースロスコープ ACではICG 蛍光観察を行う事が可能です。

② 高い耐久性

傷つきにくいサファイアクリスタルを接眼と先端部に採用することによりスコープの防護性を高め、さらに全ての接続部をレーザー溶接することによりスコープ耐久性を高めています。

③ 豊富なスコープバリエーション

膝関節、肩関節、股関節、肘関節、手関節、全ての関節部位に対応できる豊富なサイズバリエーションを揃えています。



* IDEAL EYES アイピースタイプ アースロスコープ (オートクレーブ対応)

医療機器認証番号	販売名
223AFBZX00048000	ハイディフィニションスコープ


PRECISION C マウントタイプ アースロスコープ (オートクレーブ対応)

医療機器認証番号	販売名
228AFBZX00015000	PRECISION C マウントスコープ


New state of the art glass lenses & Patented lens design

Improved depth of field

被写界深度を向上させることで、被写体前後のズレを軽減

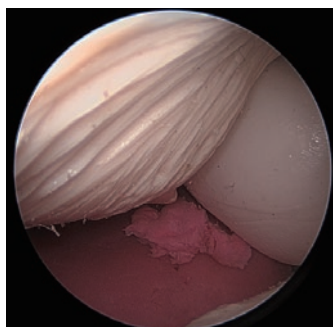


IDEAL EYES

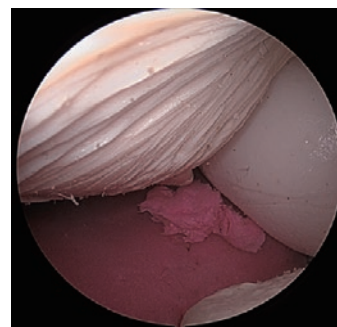


PRECISION IE 4K

New state of the art glass lenses & Patented lens design

レンズの改良により、さらなるコントラスト・画質・色彩の再現性を実現

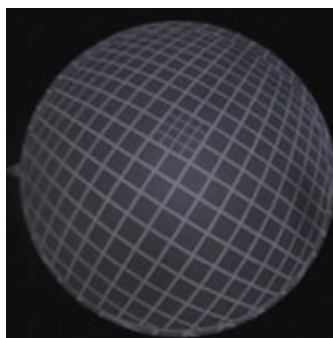

IDEAL EYES

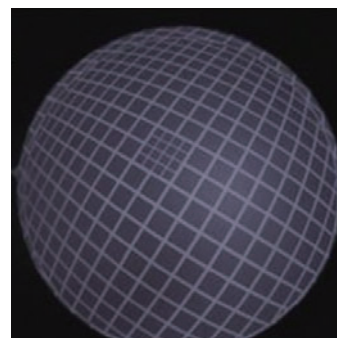

PRECISION IE 4K

Enhanced center-to-edge resolution

画像の中心部と同等に辺縁部の画像も明るくすることで、画質の差を軽減

Reduced Image distortion

魚眼レンズ効果を減少させ、より自然な画像を提供

PRECISION IE 4K アースロスコープ AC (オートクレーブ対応)



カタログ番号	製品名	外径	視野方向	視野角	有効長	ロック方式
0502444010	PRECISION IE 4K アースロスコープ AC	4.0mm	0°	105°	140mm	スピードロック
0502444030		4.0mm	30°	105°	140mm	スピードロック
0502444045		4.0mm	45°	105°	140mm	スピードロック
0502444070		4.0mm	70°	105°	140mm	スピードロック

PRECISION IE 4K C マウントタイプ アースロスコープ (オートクレーブ対応)



カタログ番号	製品名	外径	視野方向	視野角	有効長	ロック方式
0502404010	PRECISION IE 4K C マウントスコープ AC	4.0mm	0°	105°	140mm	スピードロック
0502404030		4.0mm	30°	105°	140mm	スピードロック
0502404070		4.0mm	70°	105°	140mm	スピードロック

医療機器認証番号 販売名
301AFBZX00054000 Precision IE 4K アースロスコープ

IDEAL EYES アイピースタイプ アースロスコープ (オートクレーブ対応)



カタログ番号	製品名	外径	視野方向	視野角	有効長	ライトポストの位置	ロック方式
0502-104-010	IDEAL EYES スコープ	4.0mm	0°	105°	140mm	スタンダード	スピードロック
0502-104-030		4.0mm	30°	105°	141mm	スタンダード	スピードロック
0502-104-045		4.0mm	45°	105°	141mm	スタンダード	スピードロック
0502-104-070		4.0mm	70°	105°	144mm	スタンダード	スピードロック
0502-204-010	IDEAL EYES スコープ (ロング)	4.0mm	0°	105°	166mm	スタンダード	スピードロック
0502-204-030		4.0mm	30°	105°	166mm	スタンダード	スピードロック
0502-204-070		4.0mm	70°	105°	167mm	スタンダード	スピードロック
0502-127-010	IDEAL EYES スコープ	2.7mm	0°	80°	120mm	スタンダード	スピードロック
0502-127-030		2.7mm	30°	80°	120mm	スタンダード	スピードロック
0502-127-070		2.7mm	70°	80°	122mm	スタンダード	スピードロック
0502-027-010	IDEAL EYES スコープ (ショート)	2.7mm	0°	80°	72mm	スタンダード	J-LOCK
0502-027-030		2.7mm	30°	80°	72mm	スタンダード	J-LOCK
0502-027-070		2.7mm	70°	80°	74mm	スタンダード	J-LOCK
0502-123-010	IDEAL EYES スコープ	2.3mm	0°	80°	72mm	スタンダード	J-LOCK
0502-123-030		2.3mm	30°	80°	72mm	スタンダード	J-LOCK
0502-123-070		2.3mm	70°	80°	73mm	スタンダード	J-LOCK
0502-119-010		1.9mm	0°	65°	58mm	スタンダード	J-LOCK
0502-119-030	1.9mm	30°	65°	58mm	スタンダード	J-LOCK	

医療機器認証番号 販売名
223AFBZX00048000 ハイディフィニションスコープ

アイピースタイプ アースロスコープ (オートクレーブ対応)



カタログ番号	製品名	外径	視野方向	視野角	有効長	ライトポストの位置	ロック方式
0502-244-030	スコープ (ショート)	2.7mm	30°	80°	72mm	スタンダード	スピードロック
0502-244-070		2.7mm	70°	80°	74mm	スタンダード	スピードロック
0502-344-010	スコープ	2.3mm	0°	80°	72mm	スタンダード	スピードロック
0502-344-030		2.3mm	30°	80°	72mm	スタンダード	スピードロック
0502-144-030		1.9mm	30°	65°	58mm	スタンダード	スピードロック

医療機器認証番号

販売名

224AFBZX00129000

Stryker アースロスコープ

PRECISION Cマウントタイプ アースロスコープ (オートクレーブ対応)

小さくなったフォーカスリングは、術中意図しないフォーカスのずれを防ぎます



18mm カプラーサイズに合わせた画像拡大率

接眼部にPEEK素材を用いることにより、RFデバイスからの対電磁波干渉性能を高め、術中内視鏡画像のノイズ軽減を図りました

グリップ部分が大きくなり、カメラヘッドに接続しやすくなりました

カタログ番号	製品名	外径	視野方向	視野角	有効長	ライトポストの位置	ロック方式
0502-904-010	PRECISION C マウントスコープ	4.0mm	0°	105°	140mm	スタンダード	スピードロック
0502-904-030		4.0mm	30°	105°	141mm	スタンダード	スピードロック
0502-904-070		4.0mm	70°	105°	144mm	スタンダード	スピードロック

医療機器認証番号

販売名

228AFBZX00015000

PRECISION Cマウントスコープ

HARDWARE

4.0mm ハードウェア スピードロック

外径 5.0mm シリーズ スピードロックハードウェア
4.0mm, 140mm アースロスコープ用



OR-377-31-144 *1	スピードロックカニューレ 5mm	ローテータリングストップコック 2付
OR-377-31-145 *1		ローテータリングストップコック 1付
OR-377-31-129 *1	オペチュレーター	5mm カニューレ用
OR-377-31-229 *1	トロカール	5mm カニューレ用
0377-031-901 *1	スピードロック カニューレプラグ	4mm スコープ用

外径 5.8mm シリーズ スピードロックハードウェア

4.0mm, 140mm アースロスコープ用



OR-0747-031-550 * ¹	スピードロックカニューレ 5.8mm	ローテーティングストップコック 2付
OR-0747-031-530 * ¹		ローテーティングストップコック 1付
OR-0747-031-510 * ¹	オブチュレーターペンシルチップ	5.8mm カニューレ用
OR-0747-031-511 * ¹	オブチュレータープラントチップ	5.8mm カニューレ用
OR-0747-031-520 * ¹	トロカール	5.8mm カニューレ用
0377-031-901 * ¹	スピードロック カニューラプラグ	4mm スコープ用


外径 6.5mm インフロー／アウトフロー カニューラ

4.0mm, 140mm アースロスコープ用



0747-031-650 * ²	関節鏡用インフローアウトフローカニューラ	ローテーティングストップコック 2付
OR-0747-031-510 * ¹	オブチュレーターペンシルチップ	5.8mm カニューレ用
OR-0747-031-511 * ¹	オブチュレータープラントチップ	5.8mm カニューレ用
OR-0747-031-520 * ¹	トロカール	5.8mm カニューレ用
0377-031-901 * ¹	スピードロック カニューラプラグ	4mm スコープ用

外径 6.5mm インフロー／アウトフローカニューラ 4.0mm, 140mm アースロスコープ用 (0747-031-650)

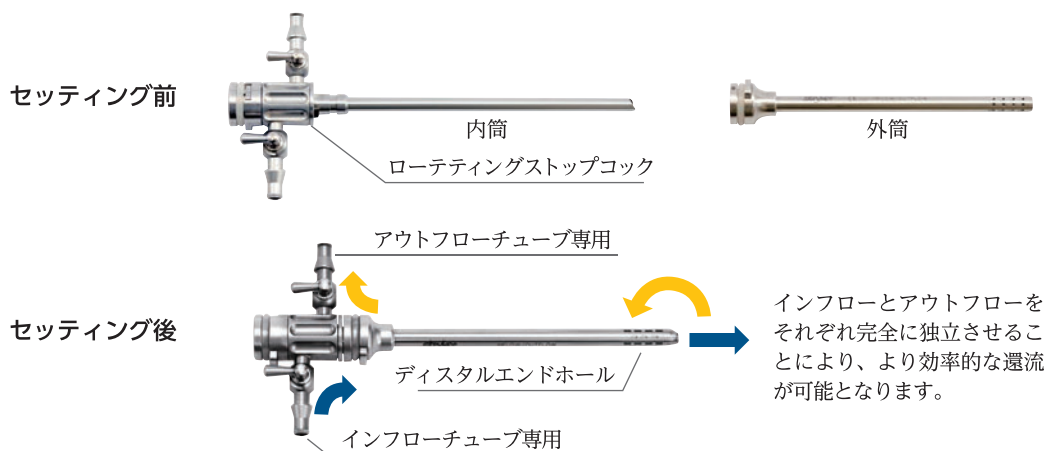

4.0mm ロング ハードウェア スピードロック

外径 5.8mm シリーズ スピードロックハードウェア

ロング 4.0mm, 165mm アースロスコープ用




0502-577-550 * ²	スピードロックカニューレ外径 5.8mm ロング	ローテーティングストップコック 2付
0502-577-520 * ²	トロカールロング	外径 5.8mm スピードロック
0502-577-510 * ²	オブチュレータープラントチップロング	外径 5.8mm スピードロック
0502-577-515 * ²	オブチュレーターペンシルチップロング	外径 5.8mm スピードロック
0377-031-901 * ¹	スピードロックカニューラプラグ	4mm スコープ用

2.7mm ハードウェア スピードロック

外径 4.0mm シリーズ スピードロックハードウェア

2.7mm, 120mm アースロスコープ用

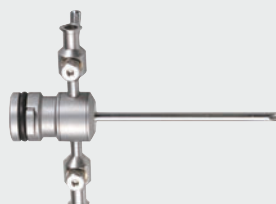

0343-331-430 * ¹	スピードロックカニューレ 4mm	ローテーティングストップコック 1付
OR-343-331-450 * ¹	スピードロックカニューレ 4mm	ローテーティングストップコック 2付
OR-343-331-410 * ¹	オブチュレーターペンシルチップ	4mm カニューレ用
OR-343-331-411 * ¹	オブチュレータープラントチップ	4mm カニューレ用
OR-343-331-420 * ¹	トロカール	4mm カニューレ用

医療機器届出番号

販売名

*1 13B1X10209000494


ストライカー 穿刺器具

*2 13B1X10209000683

ストライカー アースロスコープ用処置具

2.7mm ショート ハードウェア スピードロック

外径 3.2mm シリーズ スピードロックハードウェア
2.7mm, 75mm アースロスコープ用 (ローフロー)

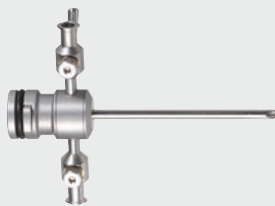


0502-344-530 *2	スピードロックカニューレ外径 3.2mm	ローテーティングストップコック 1付
0502-344-560 *2	スピードロックカニューレ外径 3.2mm	ローテーティングストップコック 2付
0502-344-500 *2	スピードロック オブチュレーター	カニューレ 3.2 用ペンシルチップ
0502-344-510 *2	オブチュレータープラントチップ	外径 2.3mm スピードロック
0502-344-520 *2	トロカール	外径 2.3mm スピードロック

外径 4.0mm シリーズ スピードロックハードウェア
2.7mm, 75mm アースロスコープ用 (ハイフロー)

0502-244-530 *2	スピードロックカニューレ外径 4.0mm	ローテーティングストップコック 1付
0502-244-560 *2	スピードロックカニューレ外径 4.0mm	ローテーティングストップコック 2付
0502-244-500 *2	オブチュレーター ペンシルチップ ショート	外径 2.7mm スピードロック
0502-244-510 *2	オブチュレータープラントチップ ショート	外径 2.7mm スピードロック
0502-244-520 *2	トロカール ショート	外径 2.7mm スピードロック

2.7mm ショート ハードウェア J-LOCK

外径 3.2mm シリーズ J-LOCK ハードウェア
2.7mm, 75mm アースロスコープ用 (ローフロー)

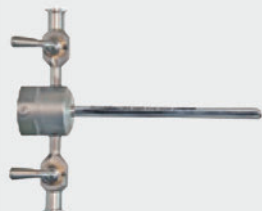

0502-713-530 *2	J-LOCK カニューレ外径 3.2mm	ローテーティングストップコック 1付
0502-713-560 *2	J-LOCK カニューレ外径 3.2mm	ローテーティングストップコック 2付
0502-713-500 *2	J-LOCK オブチュレーター	カニューレ 3.2 用ペンシルチップ
0502-713-510 *2	J-LOCK オブチュレーター	カニューレ 3.2 用プラントチップ
0502-713-520 *2	J-LOCK トロカール	カニューレ 3.2 用

外径 4.0mm シリーズ スピードロックハードウェア
2.7mm, 75mm アースロスコープ用 (ハイフロー)




0502-714-530 *2	J-LOCK カニューレ外径 4.0mm	ローテーティングストップコック 1付
0502-714-560 *2	J-LOCK カニューレ外径 4.0mm	ローテーティングストップコック 2付
0502-714-500 *2	J-LOCK オブチュレーター	カニューレ 4.0 用ペンシルチップ
0502-714-510 *2	J-LOCK オブチュレーター	カニューレ 4.0 用プラントチップ
0502-714-520 *2	J-LOCK トロカール	カニューレ 4.0 用

2.3mm ハードウェア スピードロック

外径 2.9mm シリーズ スピードロックハードウェア
2.3mm アースロスコープ用 (ローフロー)

0502-623-530 *2	スピードロックカニューレ 2.9mm	ローテーティングストップコック 1付
0502-623-500 *2	オブチュレーター 2.3mm	スピードロックカニューレ 2.9mm用ペンシル
0502-623-510 *2	オブチュレーター 2.3mm	スピードロックカニューレ 2.9mm用プラント

外径 3.2mm シリーズ スピードロックハードウェア
2.3mm アースロスコープ用 (ハイフロー)

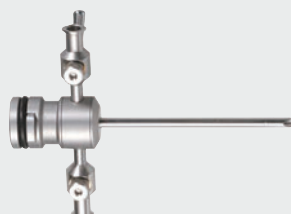


0502-344-530 *2	スピードロックカニューレ外径 3.2mm	ローテーティングストップコック 1付
0502-344-560 *2	スピードロックカニューレ外径 3.2mm	ローテーティングストップコック 2付
0502-344-500 *2	スピードロックオブチュレーター	カニューレ 3.2 用ペンシルチップ
0502-344-510 *2	オブチュレータープラントチップ	外径 2.3 用スピードロック
0502-344-520 *2	トロカール	外径 2.3 用スピードロック

2.3mm ハードウェア J-LOCK

外径 2.9mm シリーズ J-LOCK ハードウェア 2.3mm アースロスコープ用 (ローフロー)

0502-712-530 *2	J-LOCK カニューレ外径 2.9mm	ローテーティングストップコック1付
0502-712-500 *2	J-LOCK オプチュレーター	カニューレ 2.9 用ペンシルチップ
0502-712-520 *2	J-LOCK トロカール	カニューレ 2.9 用


外径 3.2mm シリーズ J-LOCK ハードウェア 2.3mm アースロスコープ用 (ハイフロー)

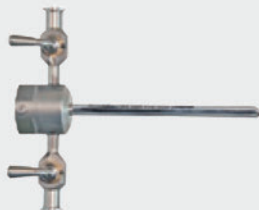

0502-713-530 *2	J-LOCK カニューレ 外径 3.2mm	ローテーティングストップコック1付
0502-713-560 *2	J-LOCK カニューレ 外径 3.2mm	ローテーティングストップコック2付
0502-713-500 *2	J-LOCK オプチュレーター	カニューレ 3.2 用ペンシルチップ
0502-713-510 *2	J-LOCK オプチュレーター	カニューレ 3.2 用プラントチップ
0502-713-520 *2	J-LOCK トロカール	カニューレ 3.2 用

1.9mm ハードウェア スピードロック


外径 2.8mm シリーズ スピードロックハードウェア 1.9mm アースロスコープ用

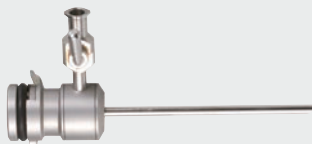

0502-144-530 *2	スピードロックカニューレ外径 2.8mm	ローテーティングストップコック1付
0502-144-560 *2	スピードロックカニューレ外径 2.8mm	ローテーティングストップコック2付
0502-144-500 *2	オプチュレーター ペンシルチップ	外径 1.9mm スピードロック
0502-144-510 *2	オプチュレーター プラントチップ	外径 1.9mm スピードロック

1.9mm ハードウェア J-LOCK

外径 2.8mm シリーズ J-LOCK ハードウェア 1.9mm アースロスコープ用

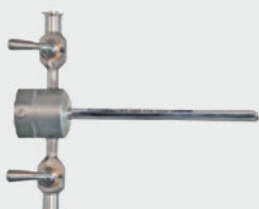

0502-711-530 *2	J-LOCK カニューレ外径 2.8mm	ローテーティングストップコック1付
0502-711-560 *2	J-LOCK カニューレ外径 2.8mm	ローテーティングストップコック2付
0502-711-500 *2	J-LOCK オプチュレーター	カニューレ 2.8mm 用 ペンシルチップ
0502-711-510 *2	J-LOCK オプチュレーター	カニューレ 2.8mm 用 プラントチップ
0502-711-520 *2	J-LOCK トロカール	カニューレ 2.8mm 用

医療機器届出番号

販売名

*2 13B1X10209000683

ストライカー アースロスコープ用処置具

TRAYS

アースロスコープ用 滅菌ケース



滅菌ケース アースロスコープ2本用
0233-032-104
アースロスコープ 2 本用
長さ 28 × 幅 10 × 高さ 5cm



滅菌ケース(アースロスコープ・アクセサリ)
0233-032-116
アースロスコープ 2 本 ハードウェア
長さ 29 × 幅 18 × 高さ 5cm



滅菌ケース アースロスコープ・カメラ用
0233-032-105
アースロスコープ 3 本 カメラヘッド1個
長さ 52 × 幅 24 × 高さ 10cm



滅菌ケース エンドスコープ・カメラ用
0233032302
長さ 52 × 幅 25 × 高さ 7cm

Japan

この印刷物はstryker社の製品を掲載しています。全てのstryker社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: ED1-163
YN/MI 2m 01/22

Copyright © 2022 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者

日本stryker株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp