

Dall-Miles Cable system

ドールマイルズ・ケーブルシステム

- ▶ 高い締結力で確実な固定
- ▶ 幅広い適応
- ▶ シンプルな手術手技





Dall-Miles Cable system

ドールマイルズ・ケーブルシステムは、バイタリウム製のマルチフィラメントケーブルと、スリーブ、グリップからなる、高い機械特性と柔軟性を持つ締結システムです。

高い締結力で確実に固定

- マルチフィラメントケーブルは高い疲労強度/耐腐食性/引張り強度を備えています。
- 柔軟性が高く、しかも操作性が良く、ねじれも防ぎます。
- モノフィラメントワイヤーに比べ、耐久性が高く、テンションを維持できます。

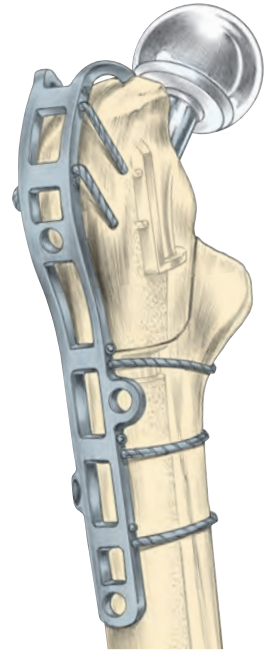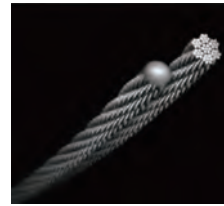

幅広い適応

ケーブル+ケーブルグリップ / グリッププレート

人工股関節置換術等で骨切りした大転子をしっかりと固定できます。

ケーブル+ケーブルスリーブ

骨折の固定、移植骨の固定、軟部組織の固定等、多様な症例に使用できます。

ビーズ付ケーブル

ケーブルの一端に付いている高い強度を持ったビーズは、シングルサイドテンショナーを使用する際にストッパーとして働きます。



シンプルな手術手技

手術器具はシンプルで、確実にコンプレッションがかけられ、強固な固定が得られるようにデザインされています。

カタログ番号一覧

ケーブル*1		
バイタリウム製(滅菌済)		
カタログ番号	ケーブル径	全長
6704-8-236	1.6mm	750mm
6704-8-240	2.0mm	



ケーブルスリーブセット*1		
ビーズ付ケーブル1本、スリーブ1個入		
バイタリウム製(滅菌済)		
カタログ番号	ケーブル径	全長
6704-0-420	1.6mm	750mm
6704-0-520	2.0mm	



ケーブルスリーブ*1		
バイタリウム製(滅菌済)		
カタログ番号	サイズ	ホール径
6704-4-016	スモール	1.6mm
6704-4-020	ミディアム	2.0mm



チタン製皮質骨スクリュー*2			
セルフタッピングフルスレッド径4.5mm			
チタン合金製(滅菌済)		チタン合金製(滅菌済)	
カタログ番号	長さ	カタログ番号	長さ
601020S	全長20mm	601036S	全長36mm
601022S	全長22mm	601038S	全長38mm
601024S	全長24mm	601040S	全長40mm
601026S	全長26mm	601042S	全長42mm
601028S	全長28mm	601044S	全長44mm
601030S	全長30mm	601046S	全長46mm
601032S	全長32mm	601048S	全長48mm
601034S	全長34mm	601050S	全長50mm



ケーブルグリップ*1		
バイタリウム製(滅菌済)		
カタログ番号	サイズ	ホール径
6704-5-016	スモール	1.6mm
6704-6-020	ミディアム	2.0mm



グリッププレート*1	
2.0mm径ケーブル2本入	
バイタリウム製(滅菌済)	
カタログ番号	プレート長
6704-3-081	全長100mm
6704-3-082	全長150mm
6704-3-083	全長200mm



*ラージサイズについては、お問合せください。

医療機器承認番号

*1 22400BZX00274000

*2 21700BZY00121000

販売名

ドールマイルズ ケーブルシステム
チタン製スクリュー・ワッシャー・ナット

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

Literature Number: HE1-150

HS/CL 0.5m 02/21

Copyright © 2021 Stryker

Printed in Japan

www.stryker.com